


CS CRIE

総合カタログ

 「ありそうでなかった」商品で、研究者の悩みを解決!




フローサイトメーターを使う方に。96wellプレート対応メッシュシール

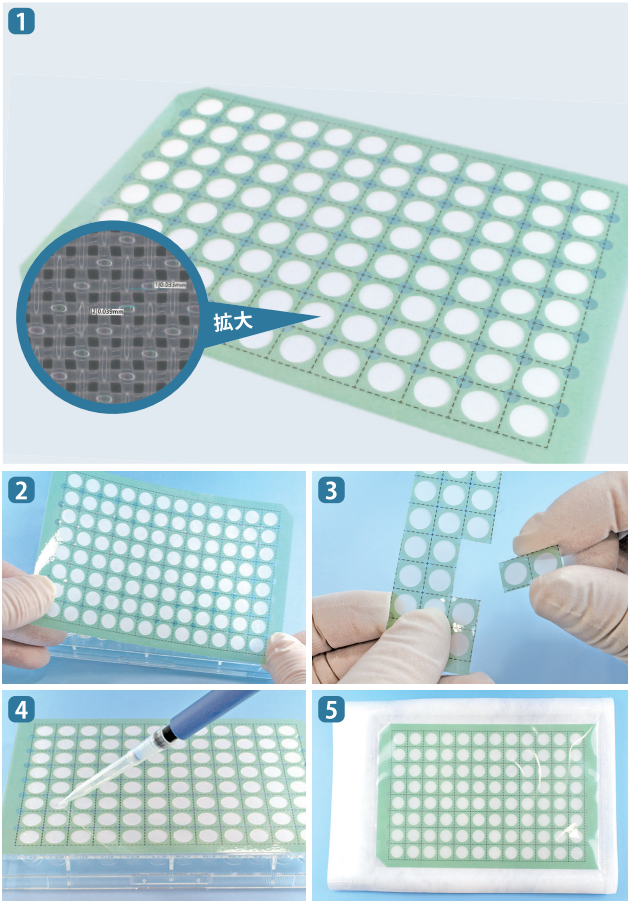

- ✓ 多検体を効率的に処理できる
- ✓ wellごとのコンタミを防止
- ✓ 実験単価(フィルターのコスト)を下げられる

面倒な細胞のフィルトレーションを簡単・便利に多検体処理できるマイクロプレートシール。「フィルトレーションが面倒」「作業が多く時間がかかる」「トータルコストが高い」といった、フローサイトメーターを使う現場の悩みを解決。
1枚ずつ個包装、ガンマ線滅菌済。

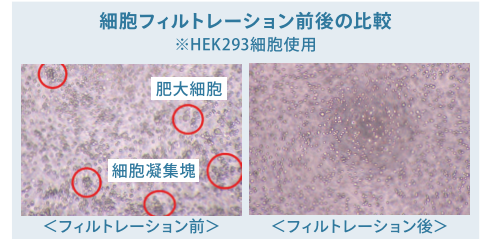


- 1 サイズ30、70、100μmの高均質なメッシュポアを採用。
- 2 シールの貼り付けが簡単で失敗しても再度貼り付けが可能。
- 3 wellごとにミシン目が入っているため、必要な分だけハサミで切り取って使えて経済的。
- 4 使用例：ピペットを少し斜めにして試料滴下。
- 5 1枚ずつ個包装されているので便利。ガンマ線滅菌済。

商品名	マイクロプレートメッシュシール(96wellplate対応)
素材	シート部:PET メッシュ部:ポリエステル繊維 粘着剤:シリコン系(圧着式)
サイズ	縦80mm × 横122mm × 厚さ0.4mm

商品コード	メッシュサイズ	数量	通常価格
R-CSC001-01A	30μm	1piece	4,000円
R-CSC001-01A	30μm	5pieces	18,000円
R-CSC018-01	70μm	1piece	4,000円
R-CSC018-01	70μm	5pieces	18,000円
R-CSC019-01	100μm	1piece	4,000円
R-CSC019-01	100μm	5pieces	18,000円

5ml遠心管チューブ対応

個包装・ガンマ線滅菌済

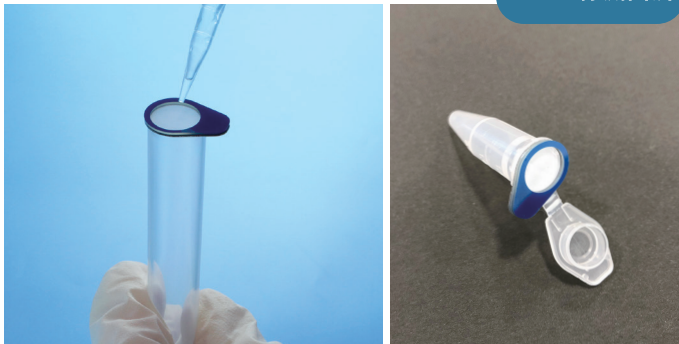

外径φ12mmチューブに対応

- ✓ フローサイトメーターを使う方に!
- ✓ 5mlチューブに貼るだけで細胞のフィルトレーションができる

5ml遠心管チューブに貼ってピペットで、細胞のフィルトレーションができるメッシュシールです。ほどよいテンションがかかり、実験のコストを抑えたい方に最適。持ち手部分があるので貼りやすく、チューブへの装着が簡単です。マイクロチューブにも対応。

商品名	5mlチューブ対応メッシュシール	商品コード	メッシュサイズ	数量	通常価格
素材	シート部:PP メッシュ部: ポリエステル繊維	R-CSC022-012	30μm	500pieces	39,000円
		R-CSC022-022	30μm	100pieces	9,800円
		R-CSC026-012	70μm	500pieces	39,000円
		R-CSC026-022	70μm	100pieces	9,800円
		R-CSC027-012	100μm	500pieces	39,000円
		R-CSC027-022	100μm	100pieces	9,800円

50ml遠心管チューブ対応

個包装・ガンマ線滅菌済



外径φ30mmチューブに対応

商品名	50mlチューブ対応メッシュシール	商品コード	メッシュサイズ	数量	通常価格
素材	シート部:PP メッシュ部: ポリエステル繊維	R-CSC065-012	30μm	30pieces	6,000円
		R-CSC065-013	30μm	60pieces	9,600円
		R-CSC066-012	70μm	30pieces	6,000円
		R-CSC066-013	70μm	60pieces	9,600円
		R-CSC067-012	100μm	30pieces	6,000円
		R-CSC067-013	100μm	60pieces	9,600円
		R-CSC068-012	300μm	30pieces	6,000円
		R-CSC068-013	300μm	60pieces	9,600円

15ml遠心管チューブ対応

個包装・ガンマ線滅菌済




外径φ17mmチューブに対応

商品名	15mlチューブ対応メッシュシール	商品コード	メッシュサイズ	数量	通常価格
素材	シート部:PP メッシュ部: ポリエステル繊維	R-CSC071-012	30μm	50pieces	7,000円
		R-CSC072-012	70μm	50pieces	7,000円
		R-CSC073-012	100μm	50pieces	7,000円


遠心メッシュプレート (96well・384well対応)

面倒な細胞のフィルトレーションを
遠心機を用いて一括処理できる!!

**1プレート
約60秒**
※96wellプレートで
フィルトレーションした場合
(条件によって変わります。)


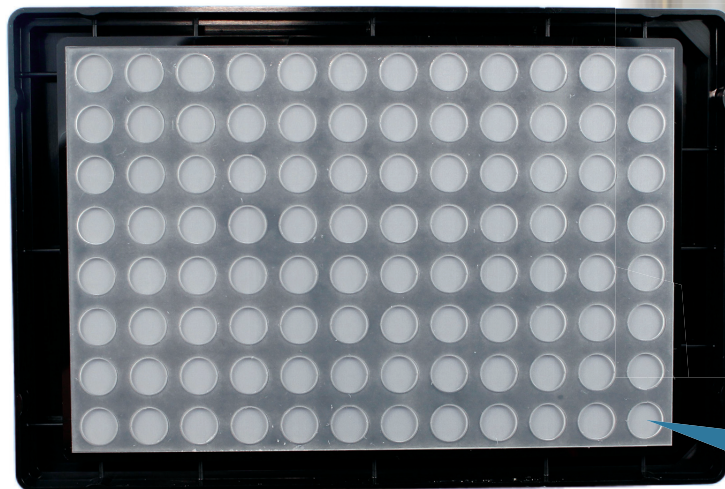


※ガンマ線滅菌済

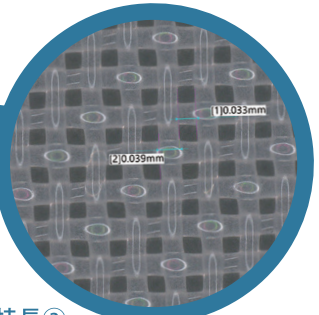

拡大

- 素早く・簡単
- シリコンシートで Well間のコンタミ防止
- 面倒な作業を自動化もできる!!

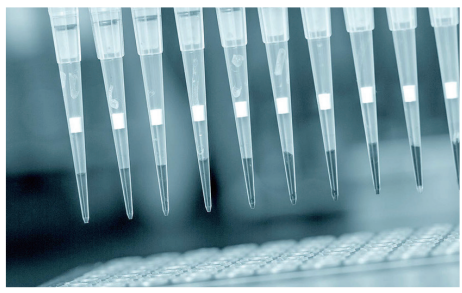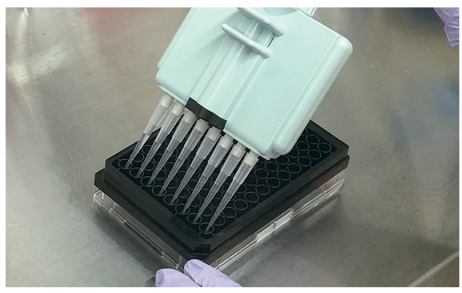


特長① マイクロプレートに重ねて、マルチピペットで分注が可能

特長② 自動化にも対応が可能

特長③ 高均質メッシュ
ポアサイズ: 30 μ m、70 μ m、100 μ m

新発売

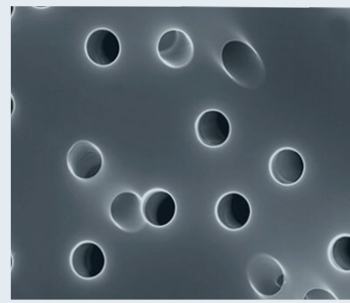

ポアサイズ: 0.45 μ m

※ポアサイズのカスタマイズも可能

開発者の声

開発者 40代・男性
細胞のフィルトレーションが面倒くさいというお声から開発しました。遠心機を使いますので、時間もコストも削減できます。ポアサイズを変えた特注対応も可能です。

商品コード	商品名	数量	通常価格	商品コード	商品名	数量	通常価格
R-CSC078-01	96well対応 30 μ m	1piece	6,800円	R-CSC0783-01	384well対応 30 μ m	1piece	12,000円
R-CSC078-02	96well対応 30 μ m	10pieces	58,000円 (1piece 5,800円)	R-CSC0783-02	384well対応 30 μ m	5pieces	49,000円 (1piece 9,800円)
R-CSC079-01	96well対応 70 μ m	1piece	6,800円	R-CSC0793-01	384well対応 70 μ m	1piece	12,000円
R-CSC079-02	96well対応 70 μ m	10pieces	58,000円 (1piece 5,800円)	R-CSC0793-02	384well対応 70 μ m	5pieces	49,000円 (1piece 9,800円)
R-CSC080-01	96well対応 100 μ m	1piece	6,800円	R-CSC0803-01	384well対応 100 μ m	1piece	12,000円
R-CSC080-02	96well対応 100 μ m	10pieces	58,000円 (1piece 5,800円)	R-CSC0803-02	384well対応 100 μ m	5pieces	49,000円 (1piece 9,800円)

<新発売: 0.45 μ m>

R-CSC081-01	96well対応 0.45 μ m	1piece	8,800円	R-CSC0813-02	384well対応 0.45 μ m	5pieces	52,500円
R-CSC081-02	96well対応 0.45 μ m	5pieces	34,000円	R-CSC0812-01	24well対応 0.45 μ m	1piece	8,800円
R-CSC0813-01	384well対応 0.45 μ m	1piece	12,800円	R-CSC0812-02	24well対応 0.45 μ m	5pieces	34,000円


安くて高品質のリアルタイムPCR用シール

剥がしやすく貼りやすい!
独自開発のシリコン圧着剤を使用!!

貼りやすい

高品質
低価格

1枚あたり
122~135円

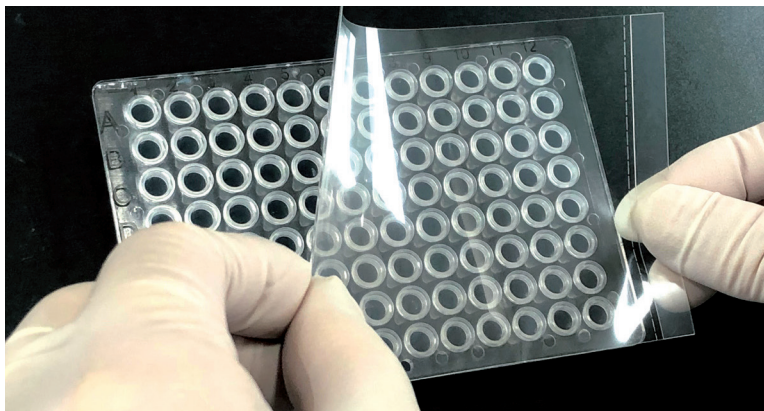

- ✓ ディisposableの費用を削減
- ✓ 確かな品質・安心安全の国内製造
- ✓ 貼りやすいものを使いたい

自家蛍光が低くPCR、リアルタイムPCR用にご利用いただけるPCRプレート用のシーリングフィルムです。圧着式のクリアシールで、ガンマ線による滅菌済み。耐熱温度は、-80℃~+110℃。国内の「ISOクラス1のスーパークリーンルーム」にて製造しています。




1 ISOクラス1 スーパークリーンルームでの日本国内製造

商品名	リアルタイムPCR用クリアシール
素材	PET(圧着式粘着剤)
サイズ	138mm × 78mm (タブなし: 119mm × 78mm)
入数	100枚
耐熱温度	-80℃ ~ +110℃

商品コード	包装	通常価格
R-CSC004-01	1set(100pieces)	13,500円 ※1枚あたり135円
R-CSC004-02	5set(500pieces)	60,750円 ※1枚あたり122円

ウェルごとの管理をしたい方に

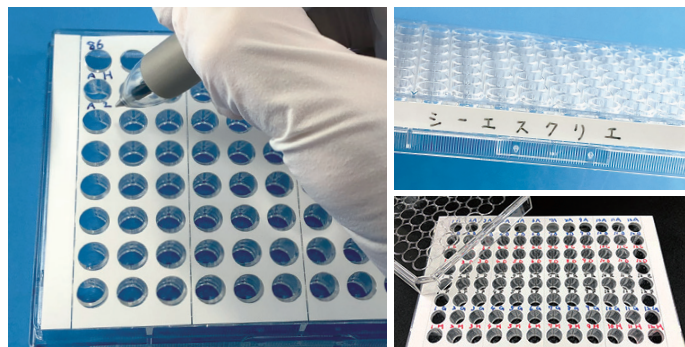


- ✓ 実験したwell(箇所)をマーキング
- ✓ wellごとの試料を簡単に見分けられる
- ✓ プレートごとにメモを書き込みたい方に

文字が書き込める画期的なマイクロプレートメモシール(実用新案申請済)。マイクロプレートのウェルごとの管理に便利です。3列ごとに切り取って使うこともできます。書き込みやすい圧着式と、コストを抑えた粘着式があります。96wellプレート対応。

商品名	マイクロプレートメモシール	商品コード	規格	包装	通常価格
素材	圧着式: PET 粘着式: 合成紙	R-CSC007-01	圧着式	50pieces	7,500円
		R-CSC007-02	圧着式	5set(250pieces)	33,750円
サイズ	122mm×86mm (セパレータなし: 120mm×80mm)	R-CSC011-01	粘着式	50pieces	3,500円
		R-CSC011-02	粘着式	5set(250pieces)	15,750円
耐熱温度	圧着式: -80℃ ~ +110℃ 粘着式: -20℃ ~ +90℃				

マイクロプレートシール(ウェル天面のりなし)

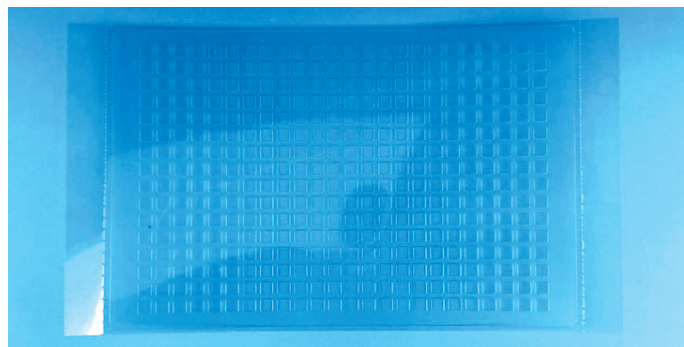

384well用


- ✓ ウェル部分に粘着剤がない
マイクロプレートシール
- ✓ ウェル天面の粘着剤が気になる方に

通常のマイクロプレートシールでは、ウェル天面の粘着剤が気になる方に。両端にタブが付いて貼りやすいのも特長です。

※ シールの貼りずれや、プレートの規格によって、ウェル天面に若干糊面がくることがあります。

商品名	マイクロプレートシール(ウェル天面のりなし)
素材	PET(圧着式粘着剤)
サイズ	144mm×81mm(タブなし: 124mm×81mm)
耐熱温度	-20℃ ~ +110℃

商品コード	規格	包装	通常価格
R-CSC076-01	384well用	20pieces	9,800円
R-CSC077-01	96well用	20pieces	9,800円

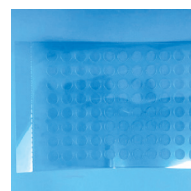

96well用

サンプル名の文字が消えるのを防ぎたい方に



- ✓ 霜が付きにくい
- ✓ ラベルの視認性が高い
- ✓ 文字が消える・にじむを防ぐ

チューブに貼ったサンプル名シールの上から貼るだけで、霜が付きにくくラベルの視認性を高めてくれる透明保護シールです。「霜や経年劣化、滅菌のためのエタノールなどで文字が消えたり見えにくくなる」といったストレスや悩みを解決します。

ラベルシールの上から貼るだけ!

- 1 透明な保護シール。
- 2 φ12mm、φ16mm、φ25mmの3タイプ。
- 3 切り取りやすいミシン目付き。


製品名	低温対応ラベル保護シール
選べる3タイプ	φ12mm 1.5mLチューブ用80枚/シート φ16mm 15mLチューブ用30枚/シート φ25mm 50mLチューブ用20枚/シート
対応温度	常温～液体窒素(-196℃)

商品コード	規格	数量	通常価格
R-CSC131-01	φ12mm 1シート(80枚)	10シート	7,800円
R-CSC132-01	φ16mm 1シート(30枚)	10シート	5,000円
R-CSC133-01	φ25mm 1シート(20枚)	10シート	6,800円


マイクロプレートシール(96well切り取りタイプ)

- ✓ 1列ごとに切り取って使える
マイクロプレートシール

1列(8well)ごとにミシン目で切り取って、試料の注入、注入後シールの再貼付ができます。1列(8well)ごとに実験を行うときにも便利です。

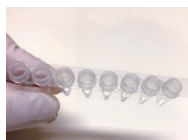


PCR用8連チューブ
にも使える!

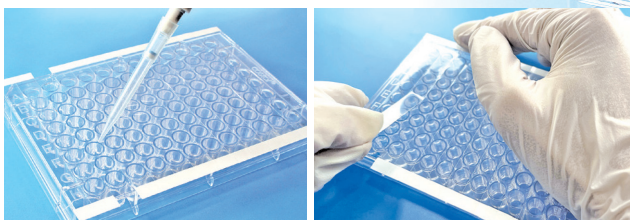


規格	96wellマイクロプレート用
素材	PET(圧着式粘着剤)
サイズ	縦タイプ 123mm×90mm 横タイプ 145mm×80mm
入数	100枚
耐熱温度	-80℃～+110℃

種類	商品コード	包装	通常価格
1列(8well)切り取り	R-CSC024-01	1set(100pieces)	14,300円
	R-CSC024-02	5set(500pieces)	64,350円
1行(12well)切り取り	R-CSC046-01	1set(100pieces)	14,300円
	R-CSC046-02	5set(500pieces)	64,350円

1列(8well)切り取りタイプ

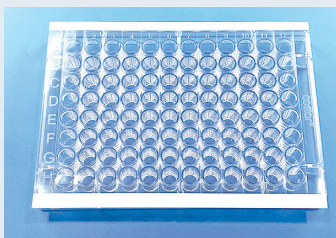


1行(12well)切り取り横タイプ

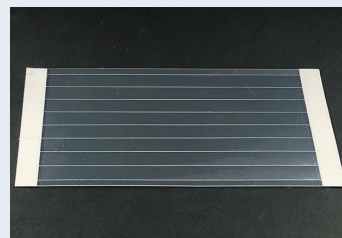

底なしマイクロプレート




1536well 底なしプレート新登場!

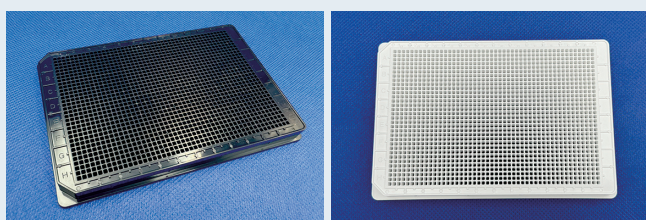

- ✓ 自由に底面の素材を貼り合わせできる
底なしマイクロプレート
- ✓ オリジナルなマイクロプレートを作製したい方に

底のないマイクロプレート。PDMSシートやCOPフィルム、ガラスなど、独自の素材を底面に貼り合わせて実験を行うことができます。

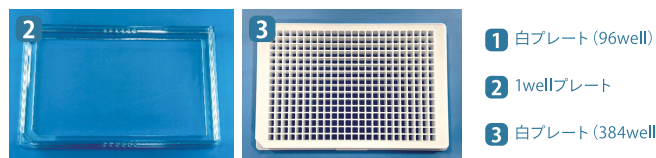

- 1 白プレート (96well)
- 2 1wellプレート
- 3 白プレート (384well)

商品コード	商品名	色	通常価格
CSCSM0011	1well 貼り合わせテープなし 5枚	透明	10,000円
CSCSM0061	6well 貼り合わせテープなし 5枚	黒	10,000円
CSCSM0241	24well 貼り合わせテープなし 5枚	黒	10,000円
CSCSM0961	96well 貼り合わせテープなし 5枚	黒	10,000円
CSCSM0961W	96well(白) 貼り合わせテープなし 5枚	白	10,000円
CSCSM3841	384well 貼り合わせテープなし 5枚	黒	10,000円
CSCSM3841W	384well(白) 貼り合わせテープなし 5枚	白	10,000円
CSCSM15361	1536well 貼り合わせテープなし 5枚	黒	15,000円
CSCSM15361W	1536well (白) 貼り合わせテープなし 5枚	白	15,000円

<貼り合わせ例>
6wellマイクロプレート
(PDMS貼付)




用途	細菌・微生物・細胞などの生化学分野での観察
種類	1well、6well、24well、96well、384well、1536wellの6種類
材質	ポリスチレン

- ※PDMSシートの貼り付けは、シリコン系粘着テープをご利用ください。
- ※貼り合わせ後、遠心分離機をご使用の場合、液漏れする可能性がございます。
- ※貼り合わせ素材はお客様でご準備ください。
- ※納品前のフィルム貼り合わせをご希望の方は別途ご相談ください。

商品コード	商品名	色	通常価格
CSCSM0012	1well 貼り合わせテープ(アクリル系)あり 5枚	透明	15,000円
CSCSM0062	6well 貼り合わせテープ(アクリル系)あり 5枚	黒	15,000円
CSCSM0242	24well 貼り合わせテープ(アクリル系)あり 5枚	黒	15,000円
CSCSM0962	96well 貼り合わせテープ(アクリル系)あり 5枚	黒	15,000円
CSCSM0962W	96well(白) 貼り合わせテープ(アクリル系)あり 5枚	白	15,000円
CSCSM3842	384well 貼り合わせテープ(アクリル系)あり 5枚	黒	15,000円
CSCSM3842W	384well(白) 貼り合わせテープ(アクリル系)あり 5枚	白	15,000円
CSCSM15362	1536well 貼り合わせテープ(アクリル系)あり 5枚	黒	20,000円
CSCSM15362W	1536well (白) 貼り合わせテープ(アクリル系)あり 5枚	白	20,000円

商品コード	商品名	色	通常価格
CSCSM0013	1well 貼り合わせテープ(シリコン系)あり 5枚	透明	15,000円
CSCSM0063	6well 貼り合わせテープ(シリコン系)あり 5枚	黒	15,000円
CSCSM0243	24well 貼り合わせテープ(シリコン系)あり 5枚	黒	15,000円
CSCSM0963	96well 貼り合わせテープ(シリコン系)あり 5枚	黒	15,000円
CSCSM0963W	96well(白) 貼り合わせテープ(シリコン系)あり 5枚	白	15,000円
CSCSM3843	384well 貼り合わせテープ(シリコン系)あり 5枚	黒	15,000円
CSCSM3843W	384well(白) 貼り合わせテープ(シリコン系)あり 5枚	白	15,000円
CSCSM15363	1536well 貼り合わせテープ(シリコン系)あり 5枚	黒	20,000円
CSCSM15363W	1536well (白) 貼り合わせテープ(シリコン系)あり 5枚	白	20,000円

PDMSシート

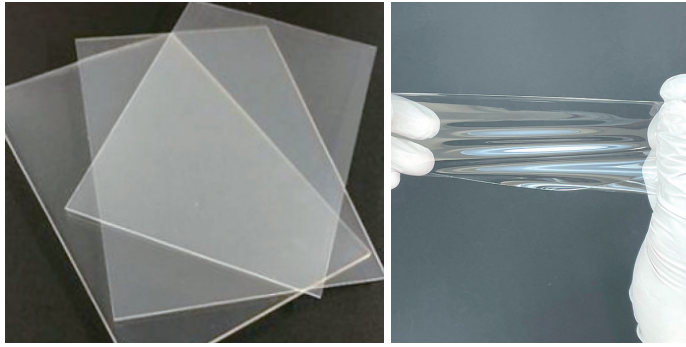


- ✓ 自家蛍光が低く、透明性の高い、極薄PDMSシート

生菌・細胞・DNAなどの分析や培養などの分野で、注目されている超薄膜・高精度な透明シリコンシート。

材質	ポリジメチルシロキサン (PDMS)
----	--------------------

商品コード	商品名	厚み	サイズ (mm)	通常価格
CSCPD1001-UT	PDMSシート (極薄シリーズ) UT60	100μm	150×100	8,000円
CSCPD10015-UT	PDMSシート (極薄シリーズ) UT60 5枚入り	100μm	150×100	28,000円
CSCPD1003-UT	PDMSシート (極薄シリーズ) UT60	100μm	300×300	35,000円
CSCPD1501-UT	PDMSシート (極薄シリーズ) UT60	150μm	150×100	8,000円
CSCPD15015-UT	PDMSシート (極薄シリーズ) UT60 5枚入り	150μm	150×100	28,000円
CSCPD1503-UT	PDMSシート (極薄シリーズ) UT60	150μm	300×300	35,000円
CSCPD2001-UT	PDMSシート (極薄シリーズ) UT60	200μm	150×100	8,000円
CSCPD20015-UT	PDMSシート (極薄シリーズ) UT60 5枚入り	200μm	150×100	28,000円
CSCPD2003-UT	PDMSシート (極薄シリーズ) UT60	200μm	300×300	35,000円
CSCPD10001	PDMSシート	1mm	120×80	10,000円
CSCPD20001	PDMSシート	2mm	120×80	11,000円
CSCPD30001	PDMSシート	3mm	120×80	12,000円

超親水PDMSシート

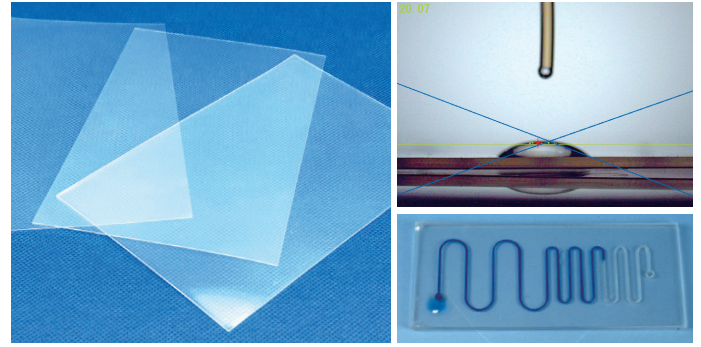



- ✓ 通常の疎水性のPDMSシートとは違い、特殊技術による親水性のPDMSシート

通常の疎水性のPDMSシートとは違い、特殊技術による親水性のPDMSシートです。マイクロ流体デバイスなど、幅広い用途が期待できます。

材質	ポリジメチルシロキサン (PDMS)
----	--------------------

商品コード	商品名	厚み	サイズ (mm)	通常価格
CSCPT1002	超親水PDMSシート (極薄シリーズ) UTS	100μm	150×100	10,000円
CSCPT10025	超親水PDMSシート (極薄シリーズ) UTS 5枚入り	100μm	150×100	36,000円
CSCPT1502	超親水PDMSシート (極薄シリーズ) UTS	150μm	150×100	10,000円
CSCPT15025	超親水PDMSシート (極薄シリーズ) UTS 5枚入り	150μm	150×100	36,000円
CSCPT2002	超親水PDMSシート (極薄シリーズ) UTS	200μm	150×100	10,000円
CSCPT20025	超親水PDMSシート (極薄シリーズ) UTS 5枚入り	200μm	150×100	36,000円

マイナス80℃での凍結保存時に剥がれにくい

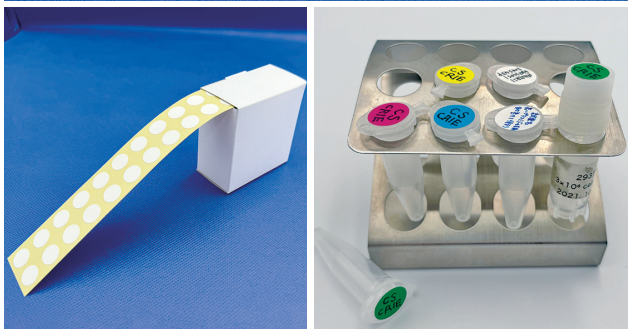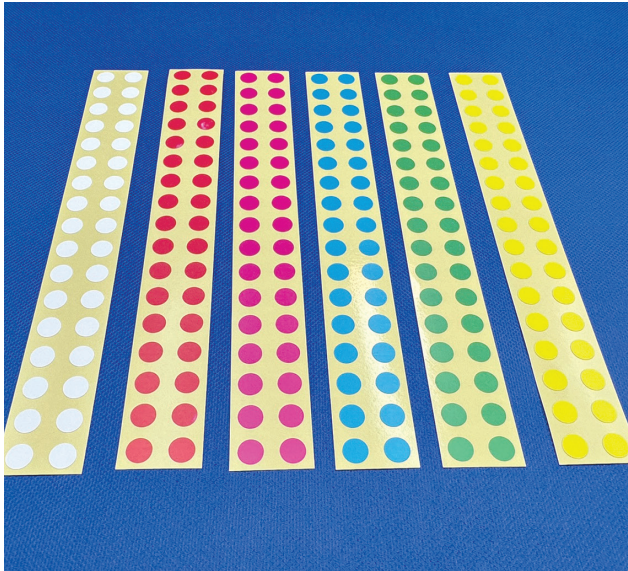

- ✓ -196℃の液体窒素環境下でも剥がれにくい
- ✓ ボールペンでも書き込み可能
- ✓ カラーは選べる6色。色での識別管理も可能
- ✓ 使うときに使う分だけ簡単に使えるロール式

100均のシールでは剥がれてしまう、海外製は価格が高いとお悩みの方に、剥がれにくく、文字が書きやすい凍結保存時用のシールです。凍結保存時に、保存サンプル名を書き込みます。

- 1 選べる6色展開
- 2 くり出し式のロールタイプ



商品名	ELSAシール (凍結保存時書き込み用)
選べる2サイズ	①クライオチューブ用: φ9.5mm ②マイクロチューブ用: φ11mm
選べる6色展開	①白、②赤、③ピンク、④青、⑤緑、⑥黄
対応温度	常温～液体窒素 (-196℃)

商品コード	規格	数量	通常価格
R-CSC155-01	φ9.5mm 白	1000pieces	3,800円
R-CSC159-01	φ9.5mm 赤	1000pieces	3,800円
R-CSC160-01	φ9.5mm ピンク	1000pieces	3,800円
R-CSC161-01	φ9.5mm 青	1000pieces	3,800円
R-CSC162-01	φ9.5mm 黄	1000pieces	3,800円
R-CSC163-01	φ9.5mm 緑	1000pieces	3,800円
R-CSC156-01	φ11mm 白	1000pieces	3,800円
R-CSC172-01	φ11mm 赤	1000pieces	3,800円
R-CSC173-01	φ11mm ピンク	1000pieces	3,800円
R-CSC174-01	φ11mm 青	1000pieces	3,800円
R-CSC175-01	φ11mm 黄	1000pieces	3,800円
R-CSC176-01	φ11mm 緑	1000pieces	3,800円

免疫染色用シール




✔ 「液体ペンタイプ」と異なり、塗る技術や乾燥の手間、液切れの心配なし

✔ 染色作業などで手間・時間・コストを削減

組織標本(スライド上の組織切片など)を囲む撥水性のシールです。染色作業などで試薬やバッファーの混入や流出を防げます。

選べる6種類

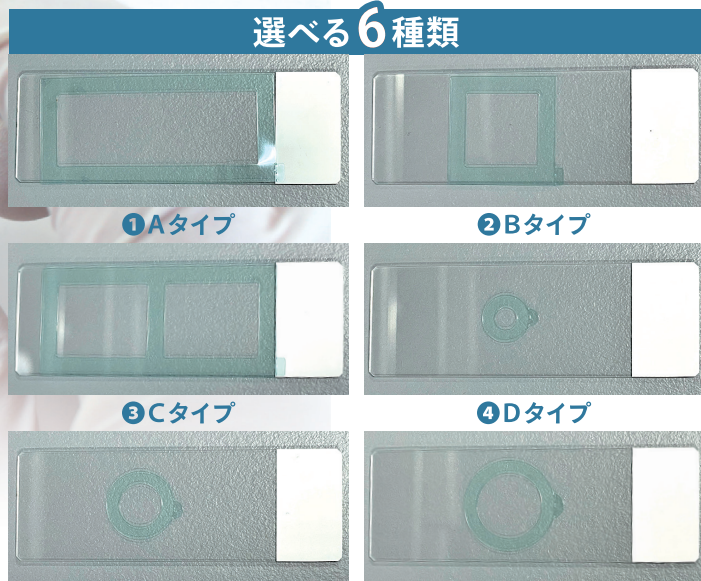

①Aタイプ

②Bタイプ


③Cタイプ

④Dタイプ

⑤Eタイプ

⑥Fタイプ

※サイズの特注対応可能です。詳細はお問い合わせください。

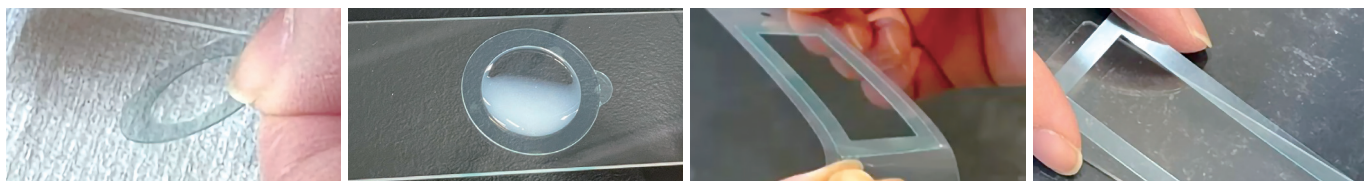

<免疫染色用シール耐性評価>

評価項目	条件	耐性
0.1% TritonX-100		○
メタノール	-20℃ 20分静置	○
アセトン	-20℃ 20分静置	○
4% PFA (パラホルムアルデヒド)	室温 20分静置	○
1% SDS (ドデシル硫酸ナトリウム)	室温 20分静置	○
50% DMSO (ジメチルスルホキシド)	室温 20分静置	○
50% DMF (ジメチルホルムアミド)	室温 1時間静置	○
レモゾール(キシレン代替品)	室温 5分静置×3回	○
100% エタノール	室温 5分静置×3回	○
70% エタノール	室温 5分静置×3回	○
ウォーターバスでの抗原賦活化	100℃ 1時間	○
オートクレーブでの抗原賦活化	121℃ 20分	○

貼り直しや、シールをきれいに剥がすことができます。(剥がしやすいタブ付き)

水分をふき取らずに抗体液を入れることもでき便利です。

高温(120℃)での使用でも粘着性を保っています。

規格:スライドガラス用 材質:PET(微粘着)

※貼るときに、エア(空気)が入ったら、押し抜いてください。

商品コード	商品名	サイズ(mm)	枚数	価格
R-CSC091-01	免疫染色用シールAタイプ	外寸55×25(内寸:47×17)・高さ0.155	60pieces	6,800円
R-CSC092-01	免疫染色用シールBタイプ	外寸25×25(内寸:17×17)・高さ0.155	90pieces	6,800円
R-CSC093-01	免疫染色用シールCタイプ	外寸55×25(内寸:21.5×17)・高さ0.155	60pieces	6,800円
R-CSC094-01	免疫染色用シールDタイプ	外径Φ11(内径:Φ5)・高さ0.155	90pieces	6,800円
R-CSC095-01	免疫染色用シールEタイプ	外径Φ16(内径:Φ10)・高さ0.155	90pieces	6,800円
R-CSC096-01	免疫染色用シールFタイプ	外径Φ21(内径:Φ15)・高さ0.155	90pieces	6,800円

販売店

サンプルのご依頼や特注対応など、お気軽にお問い合わせください。

会社HPはこちら



製造開発元:シーエステック株式会社
企画販売元:シーエスクリエ株式会社

〒611-0041

京都府宇治市槇島町大川原57-1

TEL.0774-29-9037(担当:八木)

E-mail:yagi@cstec-jp.com

https://www.cscrie-jp.com

※本紙に掲載されている価格は、2024年9月30日現在です。

※本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。

医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。

※仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。

※表示価格には消費税等は含まれていません。

また、価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

